

HOMEDICS®

LEADERS IN BEAUTY & WELLBEING

BACK WAIST SUPPORT

Lumbar Support Belt



2 YEAR GUARANTEE

ER-BW100QVD

PRODUCT FEATURES:

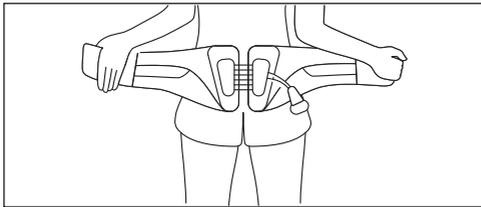
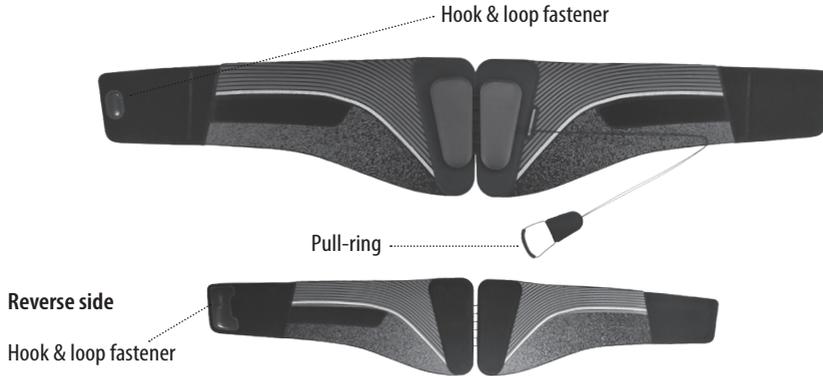


Fig. 1

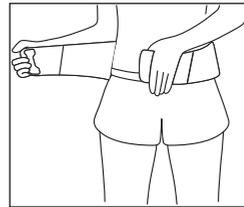


Fig. 2

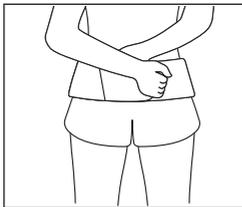


Fig. 3

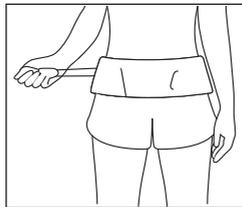


Fig. 4

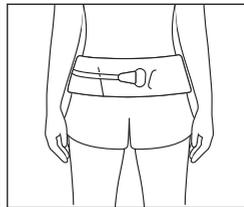


Fig. 5

INSTRUCTIONS FOR USE

For increased results and comfortable wear, please use the belt on top of your clothes.

1. Remove the pull-ring from the waist support and place the back waist support around your lower center waist. Make sure the pull-ring is on your right side (fig.1).
2. Wrap the back waist support around your waist, bringing the right side of the belt towards the left side (fig.2).
3. Pull tight and attach the hook & loop fastener on the right side of the belt to the left side (fig.3). If the waist support is too short to attach, add the adjusting belt provided.
4. Pull the pull-ring toward your body until you feel the belt start to restrain (fig.4).
5. Once comfortable, attach the pull-ring to the front of the belt using the hook & loop fastener (fig.5).
6. We recommend wearing the back waist support for a maximum of 2 hours at a time.

Maintenance

- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass/furniture polish, paint thinner, etc to clean.

Storage

Keep the back waist support in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface.

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE.**

- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems
- Do not use for longer than the recommended time.
- If you feel pain, swelling, or discomfort during use, discontinue use and seek medical attention immediately.
- Do not use on the neck or head







TWO YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to
www.homedics.co.uk/servicecentres

PRODUKTMERKMALE:

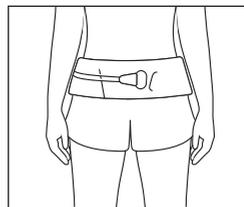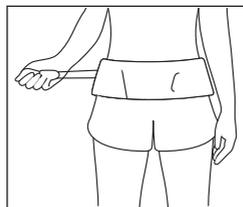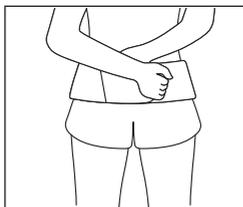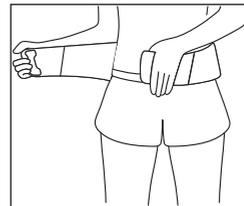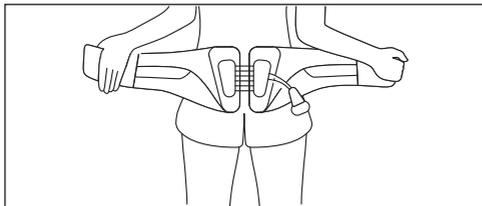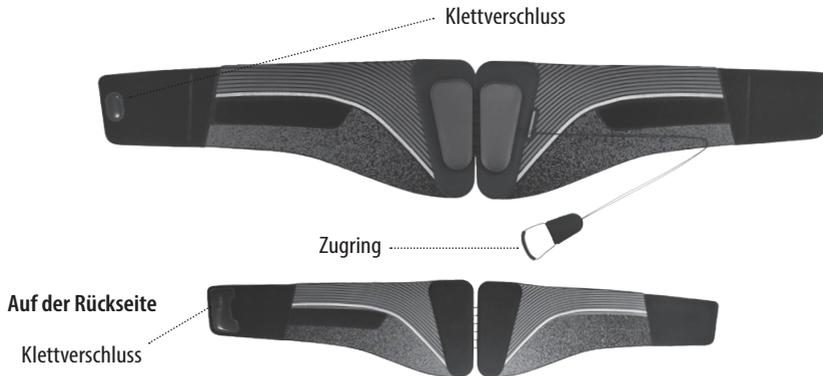

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Für bessere Ergebnisse und angenehmes Tragen verwenden Sie bitte den Gürtel über Ihrer Kleidung.

1. Zugring vom Stützgürtel entfernen. Stützgürtel um die untere mittlere Taille legen. Der Zugring muss auf Ihrer rechten Seite sein (Abb. 1).
2. Stützgürtel um die Taille legen, rechtes Ende nach links und linkes Ende nach rechts führen (Abb. 2).
3. Festziehen. Rechtes Ende mit Klettverschluss am linken Ende befestigen (Abb. 3). Gürtel ggf. mit der mitgelieferten Verlängerung schließen.
4. Zugring heranziehen bis der Gürtel fest sitzt und beginnt, die Bewegungsfreiheit einzuschränken (Abb. 4).
5. Zugring danach am Klettverschluss vorne am Gürtel befestigen (Abb. 5).

6. Der Stützgürtel sollte nicht länger als 2 Stunden am Stück getragen werden.

Pflege

- Zur Reinigung ausschließlich einen weichen, leicht befeuchteten Schwamm verwenden.
- Artikel zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, Bürsten, Glas-/Möbelpolituren, Farbverdünner oder Ähnliches verwenden.

Lagerung

Stützgürtel an einem geschützten, trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

Nicht mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen in Kontakt bringen, da diese den Stoffbezug zerschneiden oder durchstechen könnten.

VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN. GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTEREN BEDARF AUFBEWAHREN.

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 16 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Lassen Sie sich bei gesundheitlichen Bedenken vor Gebrauch des Artikels von einem Arzt beraten.
- Der Artikel sollte bequem und komfortabel zu tragen sein. Bei Schmerzen oder Unwohlsein Gebrauch aussetzen und Arzt konsultieren.
- Schwangere sollten vor Gebrauch ärztlichen Rat einholen. Personen mit beeinträchtigter Sinneswahrnehmung wird vom Gebrauch abgeraten.
- Darf NICHT von Neugeborenen, Schwerbehinderten, Schlafenden oder Bewusstlosen getragen werden. NICHT auf tauber Haut oder bei Durchblutungsstörungen verwenden.
- Nicht auf Hautreizungen, Sonnenbrand, spröder Haut oder erkrankten Hautpartien tragen.
- Nicht länger als empfohlen verwenden.

- Bei Schmerzen, Schwindelgefühl oder Unwohlsein während des Gebrauchs nicht weiter verwenden und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Nicht um Hals oder Kopf legen.

ZWEI JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:

Telefon: **0049 (0) 69 5170 9480**

E-Mail: **support@homedics.de**

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.

Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.





HOMEDICS®

FKA Brands Ltd

Manufacturer & UK Importer: FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-ER-BW100QVD-1220-01