

HOMEDICS®

LEADERS IN BEAUTY & WELLBEING

THERMAL PRO

DEEP TISSUE PERCUSSION MASSAGER



PGM-300BKQVD-EU
PGM-300RGQVD-EU
PGM-300WTQVD-EU

PRODUCT FEATURES:

fig. 1

Heat



Cool



fig. 2

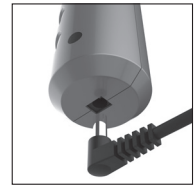


fig. 3



fig. 4



USB charging cable



Adaptor



Storage bag



MASSAGE HEADS



HEAT Active thermal head relaxes tired aching muscles



COOL Cooling calms inflamed stressed muscles

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging your device

1. To charge the product, plug the charging cable into a USB socket and connect the cable to the charging socket on the bottom of the handle (fig.2).
2. Once the charging cable is connected, the charging indicator LED will illuminate and blink red. As soon as the device is fully charged the LED indicator will change to blue.
3. Once the product is fully charged, disconnect it from the power supply.
4. The product requires 5-6 hours of charging for a full charge and will last for approximately 1 hour of use.

WARNING If the voltage input exceeds 5V, the massager will terminate charging and the indicating light will blink in blue in order to remind the user to use the correct voltage adaptor. Product should only be charged using the adaptor supplied (DJ0500100-511EU). Adaptor must be removed from the socket when not in use. Adaptor output charging voltage of 5Vdc and 1A must not be exceeded.

Using your device

NOTE Remember to switch off the heat when you have finished using by pressing the heat button (fig.4).

1. Select the desired massage head and fasten it into the socket on the front of the massager (fig.3). It should be finger tight only as overtightening may cause damage to the product.
2. Press and hold the power on/off/power level button for 3 seconds to turn the device on.
3. Pressing the on/off/power button again will cycle through the power levels:
 - Press x 1: **LO**
 - Press x 2: **MID**
 - Press x 3: **HI**
- Pressing the button again will repeat this sequence.

4. To use heat treatment with Heat massage head, press the heat button on the back of the product once (fig.4). The red LED light ring on the Heat head will illuminate. Press the power button to start the massage and adjust intensity as above. **NOTE** Heat function only works with Heat massage head.
5. **IMPORTANT** Before using the Cool massage head, place in a freezer for several hours.
6. Gently move the massage head over the part of the body you wish to massage at first, then gently apply more pressure as desired. If you are a first time user it is recommended that you start on power level 1 and press gently.
7. A long press on the on/off/power button for 1 second will turn the massager off.
8. The product cannot be used while charging

DO NOT USE THE PRODUCT FOR OVER 30 MINUTES CONTINUOUSLY. IF THE PRODUCT IS USED FOR OVER 30 MINUTES IT MAY TRIGGER THE HEAT PROTECTION FEATURE AND STOP AUTOMATICALLY. PLEASE WAIT FOR AT LEAST 30 MINUTES FOR THE PRODUCT TO COOL OFF BEFORE RE-USING.

Cleaning your device

- Make sure the device is unplugged from any power supply and allow to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Never allow water or any other liquid to come into contact with the appliance.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass/furniture polish, paint thinner, etc to clean.

PRODUKTMERKMALE:

abb. 1

Warm



Kühl

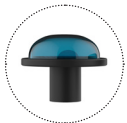


abb. 2

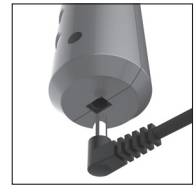


abb. 3

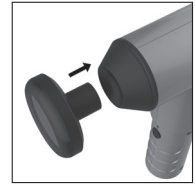


abb. 4



USB-Ladekabel



Adapter



Tasche



MASSAGEAUFsätze



WARM Aktiver Wärmeaufsatz entspannt müde und schmerzende Muskeln



COOL Kühlung beruhigt entzündete und verspannte Muskeln

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Aufladen des Geräts

- Schließen Sie das Ladekabel an einen USB-Stecker an, und verbinden Sie das Kabel mit dem Ladeanschluss an der Unterseite des Gerätegriffs (Abb. 2).
- Nach Anschluss des Ladekabels blinkt die LED-Ladeanzeige rot. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige blau.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, sobald es vollständig geladen ist.
- Das Gerät benötigt 5-6 Stunden für eine vollständige Aufladung und hat eine Betriebszeit von ca. 1 Stunde.

WARNUNG Wenn der Spannungseingang 5 V überschreitet, beendet das Massagegerät den Ladevorgang und die Anzeigelampe blinkt blau, um den Benutzer daran zu erinnern, den richtigen Spannungsadapter zu verwenden. Das Produkt sollte nur mit dem mitgelieferten Adapter aufgeladen werden (DJ0500100-S11EU). Der Adapter muss bei Nichtgebrauch aus der Steckdose entfernt werden. Die Adapter-Ausgangsspannung von 5 V DC und 1 A darf nicht überschritten werden.

Verwendung des Geräts

HINWEIS: Nach Gebrauch Wärmefunktion stets über die Wärme-Taste ausschalten (Abb.4).

- Wählen Sie den gewünschten Massageaufsatz aus, und schieben Sie diesen in die Öffnung an der Vorderseite des Massagegeräts (Abb. 3). Achten Sie darauf, den Aufsatz nur handfest anzuziehen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Halten Sie die Ein/Aus/Intensitäts-Taste 3 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Durch erneutes Drücken der Ein/Aus/Intensitäts-Taste werden die verschiedenen Intensitätsstufen ausgewählt:
 - 1 x drücken: **NIEDRIG**
 - 2 x drücken: **MITTEL**
 - 3 x drücken: **HOCH**

- Bei erneutem Drücken der Taste beginnt diese Abfolge von vorne.
- Für die Wärmebehandlung mit dem Massageaufsatz einmal auf die Wärme-Taste auf der Rückseite drücken (Abb. 4). Der rote LED-Ring am Aufsatz beginnt zu leuchten. Massagefunktion über die Ein/Aus-Taste einschalten und Stufe einstellen (siehe oben). **HINWEIS:** Wärmefunktion nur beim wärmenden Massageaufsatz verfügbar
 - WICHTIG** Kühlenden Massageaufsatz vor Gebrauch einige Stunden ins Gefrierfach legen.
 - Bewegen Sie den Massageaufsatz vorsichtig über den Körperteil, den Sie zuerst massieren möchten, und üben Sie dann nach Bedarf vorsichtig mehr Druck aus. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir, die Intensitätsstufe 1 auszuwählen und sanften Druck auszuüben.
 - Das Gerät wird ausgeschaltet, indem Sie die Ein/Aus/Intensitäts-Taste eine Sekunde lang gedrückt halten.
 - Das Gerät kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 30 MINUTEN OHNE UNTERBRECHUNG. BEI EINEM UNUNTERBROCHENEN BETRIEB VON MEHR ALS 30 MINUTEN KANN DIE HITZESCHUTZFUNKTION AUSGELÖST UND DAS GERÄT AUTOMATISCH ABGESCHALTET WERDEN.

WARTEN SIE MINDESTENS 30 MINUTEN, BIS DAS GERÄT ABGEKÜHLT IST, BEVOR SIE ES ERNEUT VERWENDEN.

Reinigen des Geräts.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen. Zur Reinigung ausschließlich einen weichen, leicht befeuchteten Schwamm verwenden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, Bürsten, Glas-Möbelpolituren, Farbverdünner oder Ähnliches verwenden.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

fig. 1

Calore



Freddo



fig. 2



fig. 3



fig. 4



Cavo USB di carica



Adattatore



Borsa



TESTE MASSAGGIANTI



CALORE La testina termica attiva rilassa i muscoli stanchi e doloranti



FREDDO Il raffreddamento calma i muscoli stressati e infiammati

ISTRUZIONI PER L'USO:

Carica del dispositivo

1. Per caricare il prodotto, inserire il cavo di carica in una presa USB e collegarlo alla presa di carica sulla parte inferiore dell'impugnatura (fig. 2).
2. Dopo il collegamento del cavo di carica, la spia di carica a LED si accende e lampeggia in rosso. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia a LED diventa blu.
3. Quando il prodotto è completamente carico, scollegarlo dall'alimentazione.
4. Per una carica completa sono necessarie 5-6 ore, che consentono circa 1 ora di utilizzo.

AVVERTIMENTO Se la tensione in ingresso supera i 5 V, il massaggiatore interromperà la ricarica e la spia lampeggerà in blu per ricordare all'utente di utilizzare l'adattatore di tensione corretto. Il prodotto deve essere caricato solo utilizzando l'adattatore fornito (DJ0500100-S11 EU). L'adattatore deve essere rimosso dalla presa quando non viene utilizzato. Non superare la tensione di carica in uscita dell'adattatore di 5VCC e 1 A

Utilizzo del dispositivo

NOTA Ricordarsi di spegnere il calore al termine dell'uso premendo il relativo pulsante (fig. 4).

1. Scegliere la testina di massaggio desiderata e alloggiarla nel raccordo sulla parte anteriore del massaggiatore (fig. 3). Serrarla soltanto con le dita, perché un serraggio eccessivo può danneggiare il prodotto.
2. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante del livello di alimentazione per 3 secondi.
3. Premendo nuovamente il pulsante di alimentazione è possibile selezionare i livelli disponibili:
 - Premere 1 volta **BASSO**
 - Premere 2 volte **MEDIO**
 - Premere 3 volte **ALTO**

4. Premendo nuovamente il pulsante, la sequenza si ripete.
4. Per utilizzare il trattamento termico con l'apposita testina, premere una volta il pulsante per il calore sul retro del prodotto (fig. 4). L'anello luminoso a LED rosso sulla testina massaggiante Calore si illumina. Premere il pulsante di accensione per avviare il massaggio e regolare l'intensità come sopra. **NOTA** La funzione Calore è utilizzabile solo con la testina massaggiante Calore.
5. **IMPORTANTE** Prima di utilizzare la testina massaggiante Freddo, metterla in freezer per qualche ora.
6. Muovere delicatamente la testina sulla parte del corpo che si vuole massaggiare per prima, quindi applicare delicatamente una maggiore pressione, come desiderato. Al primo utilizzo, si consiglia di iniziare con il livello di potenza 1 e di premere delicatamente.
7. Premendo il pulsante di alimentazione per 1 secondo il massaggiatore si spegne.
8. Il prodotto non può essere utilizzato mentre è in carica.

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO ININTERROTTAMENTE PER PIÙ DI 30 MINUTI.

SE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO PER PIÙ DI 30 MINUTI, SI ATTIVA LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO CHE ARRESTA AUTOMATICAMENTE IL DISPOSITIVO.

PRIMA DI RIUTILIZZARLO, ATTENDERE ALMENO 30 MINUTI CHE IL PRODOTTO SI RAFFREDDI.

Pulizia del dispositivo.

- Prima della pulizia, verificare che il dispositivo sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione elettrica e lasciare che si raffreddi. Pulire unicamente con una spugna morbida e leggermente inumidita.
- Evitare che l'acqua o altro liquido venga a contatto con l'apparecchio.
- Non pulire mediante immersione in prodotti liquidi.
- Non pulire con detersivi abrasivi, spazzole, prodotti lucidanti per vetro/mobili, solventi e così via.

FONCTIONS DU PRODUIT :

fig. 1

Thermique



Rafraîchissante



fig. 2

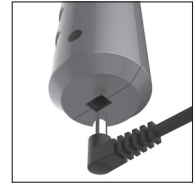


fig. 3

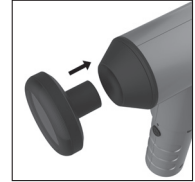


fig. 4



TÊTES DE MASSAGE



THERMIQUE La tête active thermique détend les muscles fatigués et endoloris



RAFRAÎCHISSANTE L'action rafraîchissante calme les muscles stressés et enflammés

MODE D'EMPLOI :

Charge de votre appareil

1. Pour charger l'appareil, branchez le câble de charge dans une prise USB et connectez le câble à la prise de charge située sur la partie inférieure du manche (fig. 2).
2. Lorsque le câble de charge est connecté, le témoin de charge LED s'allumera et clignotera en rouge. Dès que l'appareil est entièrement chargé, le témoin LED passera au bleu.
3. Lorsque le produit est entièrement chargé, déconnectez-le de la prise d'alimentation.
4. Pour une charge complète, comptez de 5 à 6 heures de charge. Ceci assure environ 1 heure d'utilisation.

AVERTISSEMENT Si l'entrée de tension dépasse 5 V, le masseur mettra fin à la charge et le voyant clignotera en bleu afin de rappeler à l'utilisateur d'utiliser l'adaptateur de tension approprié. Le produit ne doit être chargé qu'à l'aide de l'adaptateur fourni (DJ0500100-511EU). L'adaptateur doit être retiré de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé. La tension de charge en sortie de l'adaptateur ne doit pas excéder 5 V CC et l'intensité ne doit pas dépasser 1 A.

Utilisation de votre appareil

REMARQUE N'oubliez pas de désactiver la chaleur en fin d'utilisation, en appuyant sur le bouton Chaleur (fig. 4).

1. Sélectionnez la tête de massage souhaitée puis emboîtez-la dans la cavité située sur l'avant du masseur (fig.3). Attention de ne pas trop serrer, l'appareil pourrait être endommagé.
2. Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton On/Off (marche/arrêt) appuyé pendant 3 seconde.
3. En appuyant à nouveau sur le bouton On/Off (marche/arrêt), vous pourrez parcourir les différents niveaux de puissance :
 - Appuyez 1 fois : **LO (faible)**
 - Appuyez 2 fois : **MID (moyen)**

- Appuyez 3 fois : **HI (élevé)**
 - Appuyez à nouveau sur le bouton pour répéter cette séquence.
4. Pour utiliser le traitement thermique avec la tête de massage thermique, appuyez une fois sur le bouton Chaleur situé sur l'arrière de l'appareil (fig. 4). Le voyant circulaire rouge à LED situé sur la tête thermique s'allumera. Appuyez sur le bouton Power pour démarrer le massage et ajustez l'intensité comme indiqué précédemment. **REMARQUE** La fonction thermique ne fonctionne qu'avec la tête de massage thermique.
 5. **IMPORTANT** Avant d'utiliser la tête de massage rafraîchissante, mettez-la plusieurs heures au congélateur.
 6. Faites glisser doucement la tête du masseur sur la partie du corps que vous souhaitez masser, puis accentuez la pression comme vous le désirez. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons de débuter par le niveau de puissance 1 et d'appuyer doucement.
 7. Pour éteindre l'appareil, maintenez le doigt appuyé sur le bouton On/Off (marche/arrêt) pendant 1 seconde.
 8. N'utilisez pas l'appareil pendant sa charge.

N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT SANS ARRÊT PENDANT PLUS DE 30 MINUTES. L'UTILISATION DU PRODUIT PENDANT PLUS DE 30 MINUTES PEUT DÉCLENCHER LA FONCTIONNALITÉ DE PROTECTION THERMIQUE QUI ARRÊTERA AUTOMATIQUÉMENT L'APPAREIL. VEUILLEZ LAISSER L'APPAREIL REFRROIDIR PENDANT AU MOINS 30 MINUTES AVANT DE LE RÉUTILISER.

Nettoyage de votre appareil.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché de toute source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer uniquement avec une éponge douce et légèrement humide.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide pour le nettoyer.
- Pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de nettoyant abrasif, de brosse ou de cire pour meuble/nettoyant pour vitres, diluant à peinture, etc.

FUNCIONES DEL APARATO:

imagen 1


Calor



Frío



imagen 2

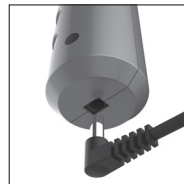

Cable de carga USB



Adaptador



imagen 3



Bolsa de almacenamiento



imagen 4



CABEZALES DE MASAJE



CALOR El cabezal térmico activo relaja los músculos cansados y doloridos



FRÍO El frío calma los músculos estresados e inflamados

INSTRUCCIONES DE USO:

Carga del aparato

1. Para cargar el producto, enchufe el cable a un adaptador de enchufe USB y conéctelo a la toma de corriente de la parte inferior del mango (imagen 2).
2. Una vez que haya conectado el cable, el led indicador de carga se encenderá y parpadeará en rojo. Cuando el aparato esté totalmente cargado, el indicador led se pondrá azul.
3. Cuando la carga esté completa, desenchufe el aparato de la corriente.
4. El producto tarda entre 5 y 6 horas en cargarse por completo, y la carga proporciona aproximadamente una hora de uso.

ADVERTENCIA Si la entrada de voltaje excede los 5V, el masajeador terminará la carga y la luz indicadora parpadeará en azul para recordarle al usuario que use el adaptador de voltaje correcto. El producto solo debe cargarse con el adaptador suministrado (DJ0500100-S11EU). El adaptador debe retirarse del enchufe cuando no esté en uso. No debe superarse el voltaje de salida del adaptador de 5 VCC y 1 A

Uso del aparato

NOTA Cuando termine, recuerde desconectar el calor pulsando el botón de calor (imagen 4).

1. Seleccione el cabezal de masaje que desee y fíjelo en el orificio de la parte frontal del aparato (imagen 3). Ajustelo solamente a mano, ya que si se aprieta demasiado se podría dañar el producto.
2. Para encender el aparato, mantenga pulsado el botón de encendido y apagado durante 3 segundos.
3. Al volver a pulsar este botón, se pasará por todos los niveles de potencia:
 - Pulsando 1 vez: **LO (bajo)**
 - Pulsando 2 veces: **MID (medio)**
 - Pulsando 3 veces: **HI (alto)**
- Al pulsar el botón de nuevo, se repetirá la secuencia.

4. Para usar el tratamiento con el cabezal de masaje de Calor, pulse el botón de calor de la parte posterior del aparato una vez (imagen 4). El aro de luz led rojo del cabezal de Calor se iluminará. Pulse el botón de encendido para iniciar el masaje y ajustar la intensidad como ya se indicó. **NOTA** La función de calor solo funciona con el cabezal de masaje de Calor.
5. **IMPORTANTE** Antes de usar el cabezal de masaje de Frío, colóquelo en el congelador durante varias horas.
6. Empiece moviendo el cabezal con suavidad sobre la parte del cuerpo que desee masajear y vaya aplicando más presión según lo desee. Si es la primera vez que usa el aparato, le recomendamos empezar por el nivel 1 de potencia y aplicar poca presión.
7. Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón de encendido y apagado durante 1 segundo.
8. El producto no se puede usar mientras se está cargando.

NO USE EL PRODUCTO DURANTE MÁS DE 30 MINUTOS SEGUIDOS. SI EL PRODUCTO SE USA DURANTE MÁS DE 30 MINUTOS, SE PODRÍA ACTIVAR LA OPCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO, LO QUE DETENDRÍA EL FUNCIONAMIENTO DE FORMA AUTOMÁTICA. ESPERE AL MENOS 30 MINUTOS A QUE EL APARATO SE ENFRÍE ANTES DE VOLVER A USARLO.

Limpieza del aparato

- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con una esponja suave y ligeramente húmeda.
- Nunca deje que el aparato entre en contacto con el agua ni con otros líquidos.
- No sumerja el aparato en ningún líquido para limpiarlo.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos, cepillos, limpiamuebles, limpiacristales, disolventes, etc. para limpiar el aparato.

PRODUCTKENMERKEN:

fig. 1

Warmte



Koel



fig. 2

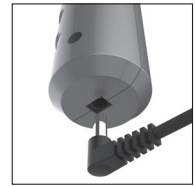


fig. 3



fig. 4



MASSAGEKOPPEN



WARMTE actieve thermische kop ontspant vermoeide, pijnlijke spieren



KOEL verkoelend, kalmeert ontstoken, gespannen spieren

GEBRUIKSAANWIJZING:

Het apparaat opladen

1. Laad het apparaat op door de oplaadkabel op een USB-poort aan te sluiten en de kabel aan de onderkant van het handvat (fig. 2) aan te sluiten op de stroomaansluiting.
2. De LED-laadindicator begint rood te knipperen zodra de oplaadkabel is aangesloten. De LED-indicator wordt blauw zodra het apparaat volledig is opgeladen.
3. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer wanneer het volledig is opgeladen.
4. Er zijn 5-6 uur nodig om het apparaat volledig op te laden. Daarna kan het ongeveer 1 uur worden gebruikt.

WAARSCHUWING Als de spanningsingang 5V overschrijdt, stopt de stimulator met opladen en knippert het indicatielampje blauw om de gebruiker eraan te herinneren de juiste spanningsadapter te gebruiken. Het product mag alleen worden opgeladen met de meegeleverde adapter (DJ0500100-S11EU). De adapter moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer deze niet wordt gebruikt. De uitgangslaadspanning van de adapter van 5 V DC en 1 A mag niet worden overschreden

Het apparaat gebruiken

NOTE Remember to switch off the heat when you have finished using by pressing the heat button (fig.4).

1. Selecteer de gewenste massagekop en bevestig deze op de aansluiting aan de voorzijde van het massageapparaat (fig. 3). Draai de kop niet te stevig aan, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.
2. Schakel het apparaat in door de start/stop-knop 3 seconde ingedrukt te houden.
3. Druk nogmaals op de start/stop-knop om de verschillende niveaus in te stellen:

- 1x drukken: **LAAG**
- 2x drukken: **MEDIUM**
- 3x drukken: **HOOG**

- Bij verder drukken op de knop wordt deze volgorde herhaald.
4. To use heat treatment with Heat massage head, press the heat button on the back of the product once (fig.4). The red LED light ring on the Heat head will illuminate. Press the power button to start the massage and adjust intensity as above. NOTE Heat function only works with Heat massage head.
 5. **IMPORTANT** Before using the Cool massage head, place in a freezer for several hours.
 6. Beweeg de massagekop voorzichtig over het lichaamsdeel dat gemasseerd moet worden en oefen indien gewenst meer druk uit. We adviseren nieuwe gebruikers om met niveau 1 te beginnen en lichte druk uit te oefenen.
 7. Druk 1 seconde lang op de start/stop-knop om het massageapparaat uit te schakelen.
 8. Het apparaat kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

GEbruik het product niet langer dan 30 minuten ononderbroken.

DE HITTEBESCHERMINGSFUNCTIE KAN NA EEN GEBRUIK VAN LANGER DAN 30 MINUTEN WORDEN GEACTIVEERD. HET PRODUCT STOPT IN DAT GEVAL AUTOMATISCH.

LAAT HET PRODUCT MINIMAAL 30 MINUTEN AFKOELEN ALVORENS HET OPNIEUW IN GEBRUIK TE NEMEN.

Het apparaat reinigen

- Koppel voor het reinigen het apparaat los van de stroomtoevoer en laat het afkoelen. Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte, licht vochtige spons.
- Voorkom dat water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen om het te reinigen.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende reinigingsmiddelen, borstels, poetsmiddelen voor glas/meubilair, verfverdunder enz.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery Capacity	3.7V/4000MAH(14.8W)
Charging voltage	5V USB 1A
1st mode Speed	2800 Rpm 46 Hz
2nd mode Speed	3400 Rpm 56 Hz
3rd mode Speed	3900 Rpm 65 Hz
Charging Time	5-6 hours
Work for when full charge	1 hours
Auto Timer	10 minutes
Weight only the massager	682 gms / 1.50 lbs
Overall size of massager	23.5 x 6 x 19 cm

Manufacturer & UK Importer: FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-PGM300BKQVDEU-0920-01
IB-PGM300RGQVDEU-0920-01
IB-PGM300WTQVDEU-0920-01

